

LUX 0.5

mine in cera purissima per odontotecnica

LUX 0.5 mine in cera per matite a scatto (\emptyset 0.5) permettono di delineare con chiarezza e precisione la chiusura marginale sul modello in gesso.

Le mine in cera **LUX 0.5** possono essere utilizzate su tutti i tipi di gesso per modelli.

La composizione delle **LUX 0.5** è cera naturale senza grafite: nessuna contaminazione per le fusioni e i metalli.

I segni tracciati con le mine **LUX 0.5** possono essere fissati con facilità spennellando uno spaziatore trasparente sopra al tratto; e al contempo facilmente rimovibili: basta semplicemente vaporizzare l'area interessata.

Le mine in cera **LUX 0.5** sono disponibili ROSSE o BLU per essere utilizzate a contrasto a seconda del colore della cera cervicale.




CERAMIC
SAFE

ALLOYS
SAFE



BLUE
&
RED

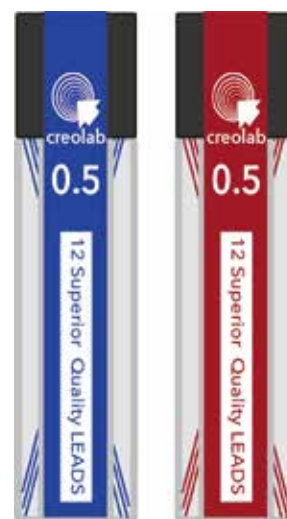

LUX 0.5 BLUE / BLU

Confezione: 6 pz

REF 92 70 60 010

LUX 0.5 RED / ROSSA

Confezione: 6 pz

REF 92 70 60 020



CREOLAB is a trademark owned by:

TRESSIS ITALIA srl

viale Italia 194
31015 Conegliano (TV)
ITALY

Tel (+39) 0438 41 83 16

Fax (+39) 0438 42 64 50

web: www.creolab.eu

email: vendite@creolab.eu

DENTAL SYSTEM



ITALIAN STYLE

DISTRIBUTED BY:

VANTAGGI:

Disponibili in 2 colori vivaci ad alta visibilità ROSSO e BLU

SENZA GRAFITE

NON inquinano le fusioni e le leghe

Semplicissime da fissare, basta un sottile strato di spaziatore trasparente

Facilissime da rimuovere, basta una leggera vaporizzazione dell'area

