

CREOWAX^{DISC}

disco in cera finissima per fresaggi CAD CAM

CREOWAX^{DISC} è la linea di dischi in cera Ø98 mm per fresatori CAD CAM; la qualità superiore della cera rende il materiale fresato molto stabile e questo permette di effettuare fresaggi con spazi ristretti.

CAD
CAM

Uno speciale mix di cere eterogenee, sia naturali che sintetiche, consente a **CREOWAX^{DISC}** di realizzare superfici omogenee, con finitura superficiale molto liscia.



L'ottima stabilità dimensionale dei dischi **CREOWAX^{DISC}** è assolutamente paragonabile alle migliori cere da modellazione: si possono realizzare bordi, anche sottili, molto lisci e non frastagliati.



CREOWAX^{DISC} ha una temperatura di fusione elevata (approx 120 °C), questo consente di fresare senza che i trucioli di cera si fondano, di conseguenza la fresatrice si sporcherà di meno e si potrà pulire con più facilità.

HIGH TEMPERATURE
SAFE

CREOWAX^{DISC} non lascia residui ed è compatibile con tutti i rivestimenti per fusione oggi in commercio.



VANTAGGI:

Dimensioni stabili, resa equivalente alle cere da modellazione di alta qualità


Brucia senza lasciare residui

Colore grigio opaco ad alta visibilità

Mix di cere sintetiche e naturali per una maggior precisione e levigatezza

Alto punto di fusione, i TRUCIOLI NON SI SCIOLGONO SULLA FRESATRICE

Formulazione speciale per la massima precisione anche nei minimi dettagli

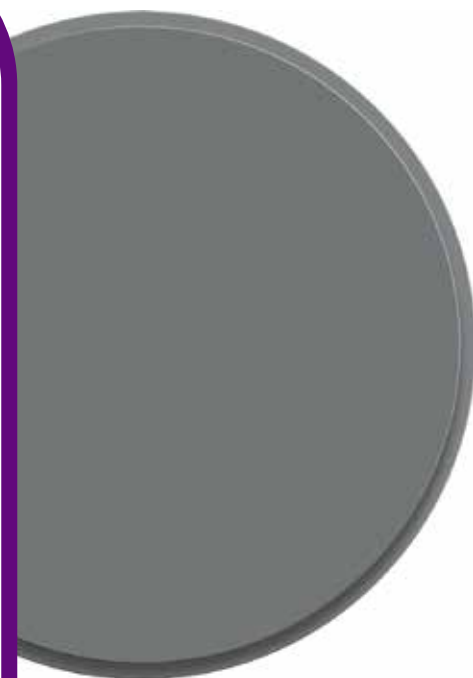

CREOWAX^{DISC}

Confezione: 1 pz

REF 92 71 15 968



CREOLAB is a trademark owned by:

TRESSIS ITALIA srl

viale Italia 194

31015 Conegliano (TV)

ITALY

Tel (+39) 0438 41 83 16

Fax (+39) 0438 42 64 50

web: www.creolab.eu

email: vendite@creolab.eu

DENTAL SYSTEM



ITALIAN STYLE

DISTRIBUTED BY:

